



Rosidal® soft

Ulcus cruris Kompressionssystem

Système de compression pour ulcère de la jambe

Leg ulcer compression system

Sistema de compresión para úlceras de la pierna

Sistema de compressão para úlcera de perna

Sistema compressivo per l'ulcera vascolare

Compressiesysteem voor ulcus cruris

Kompressiesysteem til ulcus cruris

Kompressionssystem for bensår

Kompresní systém pro léčbu ulcus cruris

Kompresný systém na terapiu ulcus cruris

Lábszárfekély kompressziós rendszer

Systém do kompresji w przypadku owrzodzenia

podudzi

Kompresijski sistem za golenje razjede

Kompresivni sustav za potkoljenični ulkus

Bacak ülseri kompresyon sistemi

Rosidal® K



Rosidal® soft



tg®

Porofix®



Mollelast® haft



tg®



Rosidal® soft

Rosidal® K

Mollelast® haft



Store in dry place under room conditions

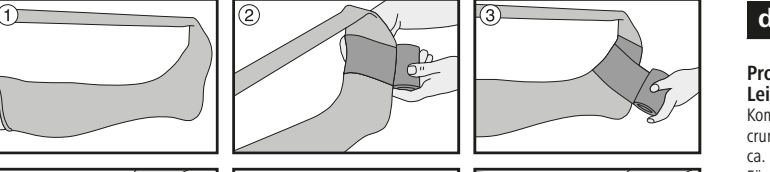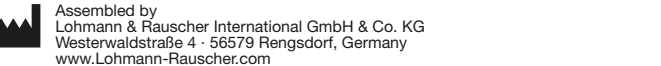

de Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung und Leistungsmerkmale
Kompressionssystem für die Therapie des Ulcus cruris venosum für einen Therapiezeitraum von 12 Wochen.

- Ein Training zur korrekten Anlage durch medizinisches Fachpersonal ist für den ungeschulten Anwender erforderlich.
- Der aufgerollte Teil der Binde (Bindekopf) zeigt nach außen. Der Bindekopf ist eng am Bein des Patienten anzurollen und zu führen.
- Um eine maximale Gelenkbewegung zu erlangen wird empfohlen den Verband am rechteckig (90°) angewinkelten Fuß anzulegen.
- Zur Fixierung der Binde Plasterstreifen benutzen. Nicht mit Verbandklebungen fixieren, da diese zu Verletzungen führen können.

Einweisung

- 1x tg® (Schlauchverband, Größe 7, 20 m, 67 % Baumwolle, 33 % Viskose (Ref. 24005)
- 4x Rosidal® soft (Schaumstoffbinde, weiß), 10 cm x 2 m x 0,2 cm, 100 % Polyurethan (Ref. 13016)
- 2x Rosidal® K (Kurzzugbinde, cremefarben, 100 % CO, 10 cm x 5 m, 100 % Baumwolle (Ref. 22201))
- 2x Rosidal® K (Kurzzugbinde, cremefarben, 100 % CO), 10 cm x 5 m, 100 % Baumwolle (Ref. 22202)
- 1x Porofil® (Helftpflaster), 2,5 cm x 5 m, 100 % Viskose, Synthetische Kautschukkleber (Ref. 143871)
- 1x Mollelast® haft (kohäsive Faserbinde, weiß), 8 cm x 20 m, Träger: 66 % Viskose, 34 % Polyamid, Naturkautschukkleber (Ref. 30070)

Zweckbestimmung

Zur Kompressionstherapie des Ulcus cruris venosum

Indikationen

Ulcus cruris venosum und seine Begleiterscheinungen, sowie chronische Ödeme (aufgrund einer Veneninsuffizienz)

Kontraindikationen

Fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheiten, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Plegmiasis coerulea dolens, Sensibilitätsstörungen der Haut, bekannte Allergien und/oder Überempfindlichkeit gegenüber Produktkomponenten.

Nebenwirkungen

In sehr seltenen Fällen können Hautirritationen und/oder Allergien auftreten.

Warnhinweise und Vorichtsmaßnahmen

- Unschonmäßiges Bandagieren kann Hautnekrosen und nervalen Druckschäden zur Folge haben.
- Eine leichte Blaufärbung der Zehen ist normal, diese muss verschwinden sobald der Patient zu gehen beginnt.
- Verschwinden die Symptome (Schmerz und Blaufärbung) nicht, muss der Verband entfernt und ein weiteres Mal, mit geringerer Kompression, angelegt werden.
- Bei stark zunehmenden Schmerzen während des Tragens muss der Patient den Verband sofort entfernen und einen Arzt konsultieren.
- Anwendung bei einem Knie-Arm-Index (ABPI) größer als 0,8 oder bei einem ABPI von 0,5 – 0,8 – nur unter ärztlicher Kontrolle.
- Bei Diabetes mit fortgeschrittener Mikroangiopathie – nur unter ärztlicher Kontrolle anwenden.

Anwendungshinweise

- Allgemeines**
 - Zur Wiederverwendung an einem einzelnen Patienten.
 - Der Kompressionsverband kann bis zu 7 Tagen am Bein verbleiben, abhängig von Wundstatus und Verbandentfernung der Wundauflage.
 - Die Wickeltechnik erfolgt in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt.
 - Rosidal® K immer unter vollem Zug (max. Dehnung) anlegen.
 - Rosidal® K immer unter vollem Zug (max. Dehnung) anlegen.
- Es wird empfohlen, den Verband morgens vor dem Aufstehen zu entfernen und die Beinmuskulatur des Beines anzulegen und den Patienten anschließend zu Gehübungen aufzufordern.
- Die Bindebreiten sollte dem Durchmesser des zu verbindenden Körperteils entsprechen.
- Die Binde muss nicht mit Zug angelegt werden, das bei der Druck der Binde vom Fuß zum Knie und ggf. bis zur Gesäßfalte hin abnimmt.
- Die Binde muss nicht mit Zug angelegt werden, das bei der Druck der Binde vom Fuß zum Knie und ggf. bis zur Gesäßfalte hin abnimmt.

Vorbereitung

Die üblichen diagnostischen Untersuchungen zum Gefäßstatus sind vor Verbandanlege

fr Mode d'emploi

Description du produit et caractéristiques de performance
Système de compression pour le traitement de l'ulcère variqueux pendant une période d'environ 12 semaines.

- Pour un gainage compressif efficace, respectez 2 Rosidal® soft et un Rosidal® K (8 cm et 10 cm) doulés à cet état. Des bandes de rechange sont jointes à ces set de façon à pouvoir effectuer une procédure de lavage après chaque changement de bande. Les consommables (tg®, tg® et Mollelast® haft) sont livrés avec des consignes d'entretien et d'usage.
- La partie enroulée de la bande (extrémité avant de la bande) doit être orientée vers l'extérieur. Serrez étroitement l'extrémité avant de la bande sur la jambe.
- Assurez-vous d'obtenir un mouvement maximal de l'articulation, il est recommandé de poser le bandage sur un pied positionné à angle droit (90°).
- Utiliser des bandes adhésives pour fixer la bande. Ne pas fixer avec des agrafes pour bande étant donné que celles-ci peuvent causer des blessures.

Composition du produit

- 1x tg® (bandage tubulaire), taille 7, 20 m, 67 % coton, 33 % viscose (Ref. 24005)
- 4x Rosidal® soft (bande en mousse, blanc), 10 cm x 2 m x 0,2 cm, 100 % polyuréthane (Ref. 13016)
- 2x Rosidal® K (bande à allongement court, couleur crème, 100 % CO, 8 cm x 5 m, 100 % coton (Ref. 22201))
- 2x Rosidal® K (bande à allongement court, couleur crème, 100 % CO, 10 cm x 5 m, 100 % coton (Ref. 22202))
- 1x Porofil® (bandage adhésif), 2,5 cm x 5 m, 100 % viscose, adhésif en caoutchouc de synthèse (Ref. 143871)
- 1x Mollelast® haft (bande de fixation cohésive, blanc), 8 cm x 20 m, Support : 66 % viscose, 34 % polyamide, adhésif en caoutchouc naturel (Ref. 30070)

Utilisation prévue

Pour le traitement compressif de l'ulcère variqueux

Indications

Ulcus cruris venosum et ses maladies concomitantes, ainsi qu'œdèmes chroniques (en raison d'une insuffisance veineuse)

Contre-indications

Artériopathies oblitérantes périphériques avancées, insuffisance cardiaque décompensée, phlébite septique, thrombose veineuse, troubles sensoriels cutanés, allergie ou hypersensibilité connue à l'un des composants du produit.

Effets indésirables

Des irritations cutanées ou des allergies peuvent survenir dans de très rares cas.

Mise en garde et mesures de précaution

- Un bandage inadéquat peut entraîner des nécroses cutanées et des lésions nerveuses causées par la pression.
- Une légère coloration bleutée des orteils est normale ; elle doit disparaître dès que le patient commence à marcher.
- Si les symptômes (douleur et coloration bleutée) persistent, alors le bandage doit être retiré et appliqué à nouveau avec moins de compression.
- Le patient doit informer le médecin en de douleurs fortes croissantes pendant le port.
- Application avec un indice de pression systolique (IPS) supérieur à 0,8 ou avec un IPS de 0,5-0,8, mais exclusivement sous surveillance médicale.
- En cas de diabète avec microangiopathie avancée, utiliser exclusivement sous surveillance médicale.

Conseils d'utilisation

Informations générales

- Le bandage doit être posé sur un seul patient.
- La compression doit rester en place sur la jambe pendant 7 jours maximum, en fonction de l'état de la plaie et de la fréquence de changement du pansement.
- La technique d'enroulement est définie en accord avec le médecin traitant.
- Always apply Rosidal® K with full tension (max. stretch).
- It is recommended to apply the bandage in the morning before the patient gets up or after the prolonged de position surlevée de la jambe, puis d'informer le patient et procéder à des changements de bande.

Recommandations d'entretien

- Rosidal® K : lavable jusqu'à 50 fois à 95 °C (lessive douce traditionnelle/cycle de lavage délicat). Peut être passé au sèche-linge jusqu'à max. 55 °C, repasser sur niveau 1.
- Rosidal® soft : lavable jusqu'à 50 fois à 95 °C (lessive douce traditionnelle/cycle de lavage délicat). Peut être passé au sèche-linge, ne pas repasser.
- La partie enroulée de la bande doit être lavée avec de l'eau chaude.
- La partie enroulée de la bande doit être lavée avec de l'eau chaude.
- La partie enroulée de la bande doit être lavée avec de l'eau chaude.

Élimination

En Europe, un code de déchet du Chapitre 18 01 de la Directive du catalogue européen des déchets (catalogue européen des déchets – CED, AV en Allemagne) peut être affecté aux déchets produits et un code de déchet du Chapitre 15 01

de cette même directive peut être affecté aux déchets d'emballage. Les emballages recyclables doivent être déposés dans des systèmes de recyclage nationaux correspondants.

en Instructions for Use

Product description and performance characteristics
System for the treatment of venous leg ulcers over a period of approx. 12 weeks.

- For an effective compression bandage, apply 2 Rosidal® soft and 1 Rosidal® K (8 cm and 10 cm) each time. Replacement bandages are included in this set to allow washing after each dressing change. Use the consumables (tg®, Porofil® and Mollelast® haft) as needed (see bandaging instructions, items 1, 9, 16 and 17). If these are used more quickly than expected (e.g. in cases of extensive oedema), the components can also be bought separately.
- The bandage is unrolled with the rolled-up portion (roll) on top. Keep the roll close to the leg. To achieve maximum joint movement, it is recommended to apply the bandage with the foot at a right angle (90°) to the leg.
- Use adhesive strips to fix the bandage in place. Do not fix in place with bandage clips because these can cause injury.

Product composition

- 1x tg® (tubular bandage), size 7, 20 m, 67% cotton, 33% viscose (Ref. 24005)
- 4x Rosidal® soft (foam bandage, white), 10 cm x 2 m x 0.2 cm, 100% polyurethane (Ref. 13016)
- 2x Rosidal® K (short stretch bandage, cream-coloured, 100% CO), 8 cm x 5 m, 100% cotton (Ref. 22201)
- 2x Rosidal® K (short stretch bandage, cream-coloured, 100% CO), 10 cm x 5 m, 100% cotton (Ref. 22202)
- 1x Porofil® (adhesive tape), 2.5 cm x 5 m, Support: 66% viscose, synthetic rubber adhesive (Ref. 143871)
- 1x Mollelast® haft (cohesive fixation bandage, white), 8 cm x 20 m, backing: 66% viscose, 34% polyamide, natural rubber adhesive (Ref. 30070)

Intended purpose

For venous leg ulcer compression therapy

Indications

Venous leg ulcers and their comorbidities, as well as chronic oedema (due to venous insufficiency)

Contraindications

Advanced peripheral arterial occlusive disease, decompensated heart failure, septic phlebitis, phlegmasia coerulea dolens, sensation disorders of the skin, known allergies and/or hypersensitivity to product components.

Side effects

In very rare cases skin irritations and/or allergies may occur.

Warnings and precautions

- Incorrect bandaging can result in skin necrosis and pressure damage to nerves.
- Slight bluish tinge to the toes is normal; this should disappear as soon as the patient starts to walk.
- If the symptoms (pain and bluish tinge) do not disappear, the bandage must be removed and applied again with less compression.
- The patient must inform their doctor if sharply increasing pain occurs while wearing the bandage.
- With an Ankle Brachial Pressure Index (ABPI) greater than 0.8 or with an ABPI of 0.5–0.8 – use only under medical supervision.
- In case of diabetes with microangiopathy advanced, use only under medical supervision.
- The patient must inform the doctor if sharply increasing pain occurs while wearing the bandage.
- Secure the tg® tubular bandage below the knee and the tg® tubular bandage below the heel.
- Return down around the ankle to secure the heel (towards the sole).
- To finish securing the heel, wrap above the ankle (towards the Achilles tendon) and continue to spiral wrap to the base of the calf muscle.
- Wrap the calf using a figure of eight pattern (see illustration).
- Secure the end of the bandage below the heel.
- The finished bandage.

Care recommendations

- Rosidal® K can be washed up to 50 times at 95°C (standard commercially available mild detergent/delicates cycle). Do not dry-safe, do not iron.
- Rosidal® soft can be washed up to 50 times at 95°C (standard commercially available mild detergent/delicates cycle). Do not dry-safe, do not iron.
- Always apply Rosidal® K with full tension (max. stretch).
- It is recommended to apply the bandage in the morning before the patient gets up or after the prolonged period of rest.
- Always apply Rosidal® K with full tension (max. stretch).
- It is recommended to apply the bandage in the morning before the patient gets up or after the prolonged period of rest.

Disposal

In Europe, product waste can be assigned a waste code of Chapter 18 01 of the Directive on the waste code from Chapter 15 01 of the Directive on the European Waste Catalogue (Waste Catalogue Ordinance - AV). Recyclable packaging should be recycled according to the relevant national recycling systems.

programa delictivo). No apto para limpeza em seco, não planchar. Os envases recicláveis devem ser depositados em sistemas de reciclagem nacionais correspondentes.

es Instrucciones de uso

Descripción del producto y características
Sistema de compresión para el tratamiento de las úlceras venosas de la pierna durante un periodo de tratamiento de aproximadamente 12 semanas.

- Para una venda de compresión eficaz, deben utilizarse 2 Rosidal® soft y 1 Rosidal® K (8 cm y 10 cm) en cada sesión. Este set incluye vendas de reemplazo para cada lavado después de cada cambio (tg®, Porofil® y Mollelast® haft) se utilizan en función de las necesidades (consulte las instrucciones de uso de cada producto).
- Se deben aplicar las vendas, la posible herida de la parte des enrollada y cubierta con un apósito conforme al estado de la herida.
- La parte des enrollada y cubierta con un apósito conforme al estado de la herida.

Composición del producto

- 1x tg® (venda tubular), tamaño 7, 20 m, 67% algodón, 33 % viscose (Ref. 24005)
- 4x Rosidal® soft (venda de espuma, blanca), 10 cm x 2 m x 0,2 cm, 100% poliuretano (Ref. 13016)
- 2x Rosidal® K (venda de tracción corta, color crema, 100% CO), 8 cm x 5 m, 100% algodón (Ref. 22201)
- 2x Rosidal® K (venda de tracción corta, color crema, 100% CO), 10 cm x 5 m, 100% algodón (Ref. 22202)
- 1x Porofil® (esparadrapo), 2,5 cm x 5 m, Soporte: 66% viscosa, adhesivo de caucho sintético (Ref. 143871)
- 1x Mollelast® haft (venda de fijación, blanca), 8 cm x 20 m, Soporte: 66% viscosa, 34% poliamida, adhesivo de caucho natural (Ref. 30070)

Finalidad prevista

Para el tratamiento de las úlceras venosas de la pierna

Indicaciones

Úlceras venosas de la pierna y sus enfermedades asociadas, así como edemas crónicos (debidos a una insuficiencia venosa)

Contraindicaciones

Enfermedades arteriales obstructivas periféricas avanzadas, insuficiencia cardíaca descompensada, flebitis séptica, flegmiasis coerulea dolens, trastornos de percepción de la piel, alergias conocidas o hipersensibilidad a los componentes del producto.

Efectos adversos

En muy raras casos pueden presentarse irritaciones cutáneas y/o alergias.

Advertencias y medidas de precaución

- Un vendaje inadecuado puede causar necrosis cutáneas y daños nerviosos debidos a una presión excesiva.
- Una ligera coloración azul de los dedos es normal; esta debe desaparecer en cuanto el paciente comienza a andar.
- Si los síntomas no desaparecen (dolor y coloración azul), la ligadura debe retirarse y volver a aplicarse otra vez, pero con una compresión más reducida.
- En caso de diabetes con lesiones microangiopáticas avanzadas, utilizar únicamente debajo de control médico.
- La aplicación con un índice tobillo-brazo (ABPI) superior a 0,8 o con un ABPI de 0,5 a 0,8; solo bajo control médico.
- Paciente diabético con microangiopatía avanzada, utilizar siempre con vigilancia médica.

Recomendaciones de uso

- Rosidal® K se puede lavar hasta 50 veces a 95 °C (lavado suave estándar/ciclo de lavado delicado). No se debe secar a máquina, no se debe planchar.
- Rosidal® soft se puede lavar hasta 50 veces a 95 °C (lavado suave estándar/ciclo de lavado delicado). No se debe secar a máquina, no se debe planchar.
- La parte enrollada de la venda debe lavarse con agua caliente.
- La parte enrollada de la venda debe lavarse con agua caliente.
- La parte enrollada de la venda debe lavarse con agua caliente.

Eliminación

En Europa, el código de residuos del Capítulo 18 01 de la Directiva del catálogo europeo de residuos (catálogo europeo de residuos – CED, AV en Alemania) puede ser afectado a los residuos producidos y un código de residuos del Capítulo 15 01 de la Directiva del catálogo europeo de residuos (catálogo europeo de residuos – CED, AV en Alemania) puede ser afectado a los residuos producidos.

programa delictivo). No apto para limpeza em seco, não planchar. Os envases recicláveis devem ser depositados em sistemas de reciclagem nacionais correspondentes.

pt Instruções de utilização

Descrição e características do produto
Sistema de compressão para o tratamento da úlcera venosa de perna por um período de terapia de aproximadamente 12 semanas.

- Para uma ligadura de compressão eficaz, devem ser aplicadas respetivamente 2 Rosidal® soft e uma Rosidal® K (8 cm e 10 cm). Neste conjunto estão incluídas ligaduras de substituição para que seja possível efetuar a lavagem após cada mudança de ligadura. Os produtos de consumo (tg®, Porofil® e Mollelast® haft) são utilizados conforme necessário (ver instruções de enlmentamento pontos 1, 9, 16 e 17). Se forem gastos prematuramente (por exemplo, no caso de edemas massivos), os componentes também podem ser adquiridos de forma individual posteriormente.
- Antes de aplicar a ligadura, é necessário realisar as explorações diagnósticas habituais sobre o estado do local.
- Antes de aplicar a ligadura, é necessário realisar as explorações diagnósticas habituais sobre o estado do local.

Composição do produto

- 1x tg® (venda tubular), tamanho 7, 20 m, 67% algodão, 33 % viscose (Ref. 24005)
- 4x Rosidal® soft (venda de espuma, branca), 10 cm x 2 m x 0,2 cm, 100% poliuretano (Ref. 13016)
- 2x Rosidal® K (ligadura de baixa elasticidade, cor creme, 100% CO), 8 cm x 5 m, 100% algodão (Ref. 22201)
- 2x Rosidal® K (ligadura de baixa elasticidade, cor creme, 100% CO), 10 cm x 5 m, 100% algodão (Ref. 22202)
- 1x Porofil® (adesivo), 2,5 cm x 5 m, Suporte: 66% viscosa, adesivo de borracha sintética (Ref. 143871)
- 1x Mollelast® haft (banda de fixação coesiva, de cor branca), 8 cm x 20 m, Suporte: 66% viscosa, 34% poliamida, adesivo de caucho natural (Ref. 30070)

Finalidade prevista

Para a terapia de compressão de úlcera venosa de perna

Indicações

Úlceras venosas de a pierna y sus enfermedades asociadas, así como edemas crónicos (debidos a una insuficiencia venosa)

Contraindicaciones

Enfermedades arteriales obstructivas periféricas avanzadas, insuficiencia cardíaca descompensada, flebitis séptica, flegmiasis coerulea dolens, trastornos de percepción de la piel, alergias conocidas o hipersensibilidad a los componentes del producto.

Efeitos adversos

Em muy raras casos pueden presentarse irritaciones cutáneas y/o alergias.

Advertencias y medidas de precaución

- Un vendaje inadecuado puede causar necrosis cutáneas y daños nerviosos debidos a una presión excesiva.
- Una ligera coloración azul de los dedos es normal; esta debe desaparecer en cuanto el paciente comienza a andar.
- Si los síntomas no desaparecen (dolor y coloración azul), la ligadura debe retirarse y volver a aplicarse otra vez, pero con una compresión más reducida.
- En caso de diabetes con lesiones microangiopáticas avanzadas, utilizar únicamente debajo de control médico.
- La aplicación con un índice tobillo-brazo (ABPI) superior a 0,8 o con un ABPI de 0,5 a 0,8; solo bajo control médico.
- Paciente diabético con microangiopatía avanzada, utilizar siempre con vigilancia médica.

Recomendaciones de uso

- Rosidal® K se puede lavar hasta 50 veces a 95 °C (lavado suave estándar/ciclo de lavado delicado). No se debe secar a máquina, no se debe planchar.
- Rosidal® soft se puede lavar hasta 50 veces a 95 °C (lavado suave estándar/ciclo de lavado delicado). No se debe secar a máquina, no se debe planchar.
- La parte enrollada de la venda debe lavarse con agua caliente.
- La parte enrollada de la venda debe lavarse con agua caliente.
- La parte enrollada de la venda debe lavarse con agua caliente.

Eliminación

En Europa, el código de residuos del Capítulo 18 01 de la Directiva del catálogo europeo de residuos (catálogo europeo de residuos – CED, AV en Alemania) puede ser afectado a los residuos producidos y un código de residuos del Capítulo 15 01 de la Directiva del catálogo europeo de residuos (catálogo europeo de residuos – CED, AV en Alemania) puede ser afectado a los residuos producidos.

programa delictivo). No apto para limpeza em seco, não planchar. Os envases recicláveis devem ser depositados em sistemas de reciclagem nacionais correspondentes.

es Instrucciones de uso

Descripción del producto y características
Sistema de compresión para el tratamiento de las úlceras venosas de la pierna durante un periodo de tratamiento de aproximadamente 12 semanas.

- Para una venda de compresión eficaz, deben utilizarse 2 Rosidal® soft y 1 Rosidal® K (8 cm y 10 cm) en cada sesión. Este set incluye vendas de reemplazo para cada lavado después de cada cambio (tg®, Porofil® y Mollelast® haft) se utilizan en función de las necesidades (consulte las instrucciones de uso de cada producto).
- Se deben aplicar las vendas, la posible herida de la parte des enrollada y cubierta con un apósito conforme al estado de la herida.
- La parte des enrollada y cubierta con un apósito conforme al estado de la herida.

Composición del producto

- 1x tg® (venda tubular), tamaño 7, 20 m, 67% algodón, 33 % viscose (Ref. 24005)
- 4x Rosidal® soft (venda de espuma, blanca), 10 cm x 2 m x 0,2 cm, 100% poliuretano (Ref. 13016)
- 2x Rosidal® K (ligadura de baixa elasticidade, cor creme, 100% CO), 8 cm x 5 m, 100% algodão (Ref. 22201)
- 2x Rosidal® K (ligadura de baixa elasticidade, cor creme, 100% CO), 10 cm x 5 m, 100% algodão (Ref. 22202)
- 1x Porofil® (adesivo), 2,5 cm x 5 m, Suporte: 66% viscosa, adesivo de borracha sintética (Ref. 143871)

- De zwahteloeten toeren elkaar altijd met ongeveer de helft tot twee keer overlappen. Leeg Rosidal® soft op altijd volledige spanning (max. rek) aan.
- Vervolg de zwahteloeten circular tot over de hiel.
- Sluit de hiel in met een toer onder de hiel (naar de voetbollen) daarna in met een toer boven de hiel (naar de achillespees) en ga verder met circulaire toeren tot de aanzet van de tuit.
- De tuit wordt met Rosidal® K (10 cm breed) in achttioerne toeren omwikkeld.
- Fixeer het uiteinde van de zwaacht onder de tuit. Vervolg de toeren tot de aanzet van de hiel de tien eindigende toer buisvormige zwaacht over het verband heen tot de kuitsmieg.
- Fixeer de toer buisvormige zwaacht onder het kniegewricht en op de voorvoet met een circulaire toer Mollelase®.
- Aangebracht verlost.

wasmachinestand voor fijne was, geschikt voor de droger op max. 55°C, strijken op stand 1. Rosidal® soft is tot 50 keer wasbaar op 95°C (met vrij) in de handel verkrijgbaar fijnwasmiddel op de wasmachinestand voor fijne was), niet strijken.

- Doet het wassen kan de maximale rek van de zwaacht grotter worden. Houd hiermee rekening bij het aanleggen van de zwaacht.
- Laegen van de zwaacht Rosidal® K (10 cm bred) i oetstelsbeveeliger.
- Enden af forbindingen fiskeres under kneskaalen med en strimmel Pororix®. tje®-forbindingen, der slutter ved taerne, traktes ud over forbindingen op til knæet.
- Fikseringsstrikt med en strimmel Pororix®. tje®-forbindingen under knæledet og på forføden sær ved hjælp af en cirkulær omvikling med Mollelase®-haft.
- Lærdigt forbinding.
- Fixer de toer buisvormige zwaacht under het kniegewricht en op de voorvoet met een circulaire toer Mollelase®.
- Aangebracht verlost.

Algemene aanwijzingen

- In geval van een ernstig neemt u contact op met de fabrikant en de verantwoordelijke zorgautoriteiten.

- Wassvorswisingen
 - Rosidal® K is tot 50 keer wasbaar op 95°C (met vrij) in de handel verkrijgbaar fijnwasmiddel op de

da Bruksanvisning

Produktbeskrivelse og egenskaber
Kompressiessystem til behandling af ulcus cruris venosum i en behandlingsperiode på ca. 12 uger.
Rosidal® K (Kortstrækbar, cremefarvet, 100 % pamuk, 33 % viskose (ref. 24005))
4 x Rosidal® K (8 cm x 10 cm). Dette sæt indeholder ekstra forbindinger, så et sæt altid kan vaskes efter hvert forbindingskøbt. Produkterne (tg®, Pororix®) kan skal altid anlægges med fuldt stræk (maks. forbindinger: pkt. 1, 9, 16 og 17). Skulle disse blive brugt op i tiden (fx. ved massade omener), kan komponenterne også købes enkeltvis på et senere tidspunkt.

Sammensætning
1x tg® (tubulbånd), størrelse 7, 20 m, 67 % bomuld, 33 % viskose (ref. 24005)
4 x Rosidal® soft (skumpulstribet, hvid), 10 cm x 2 m x 0,2 cm, 100 % polyuretan (ref. 13016)

- 2x Rosidal® K (Kortstrækbar, cremefarvet, 100 % CO, 8 cm x 5 m, 100 % bomuld (ref. 22202))
- 2x Rosidal® K (Kortstrækbar, cremefarvet, 100 % CO, 10 cm x 5 m, 100 % bomuld (ref. 22202))
- 1x Pororix® (hæfteplaster), 2,5 cm x 5 m, Bærestof: 100 % viskose, syntetisk gummi (ref. 143871)
- 1x Mollelase® haft (selvhæftende fikseringsbånd, hvid), 8 cm x 20 m, Bærestof: 66 % viskose, 34 % polyamid, naturligt gummielastisk (ref. 30070)

Anlægsale af bandage
Den utrænede bruger skal af medicinsk fagpersonale opføres i korrekt anlægsale af bandagen.

Indikationer
Den oprullede del af bandagen (bindenklude) skal oppege ud. Bindekluden skal føres tæt ved benet.

Tilslutet anvendelse
Til kompressionsbehandling af ulcus cruris venosum

Indikationer
Ulcus cruris venosum og diets følgesygdomme samt kroniske ødemer (pga. venøs insufficiens)

Kontraindikationer
Fremkredner perifer arteriell okklusiv sygdom, hjærtdekompression, septisk flebit, phlegmasia coerulea dolens, perceptions-ubønhjagter i huden, kända allergier ohveller överkänslighet mot produktkomponenter.

Bivirkninger
Fremkredner perifer arteriell okklusivsygdom, kardial dekompression, septisk flebit, phlegmasia coerulea dolens, sanseforstyrrelser i huden, kendte allergier ohveller överkänslighet over for produktkomponenter.

Sådan anlægges forbindingen (modificeret efter Sigga)
1. Rørforbindingen påføres af ca. 2,5 gange længden fra fædsperne over halen til knæet, så halvdelen trækker op over underbenet til knæet, den anden halvdel er en overskydende halvdel i hånden op til halde fodlen i en 90 graders vinkel i ankelledet.

Bivirkninger
Fremkredner perifer arteriell okklusivsygdom, kardial dekompression, septisk flebit, phlegmasia coerulea dolens, sanseforstyrrelser i huden, kendte allergier ohveller överkänslighet mot produktkomponenter.

Advarsler og forholdsregler
1. Undgå ukorrekt bandagering kan medføre hudnekrose og nevrale trykleskader.

- En let bløddet af taerne er normalt; den skal forsvinde, så snart patienten begynder at gå.
- His symptomerne ikke forsvinder (smerte og bløddet), skal forbindingen fjernes og lægges på ny, denne gang med mindre kompression.
- Ved stærkt tilkædet smerte under brugen skal patienten opsiges læge.
- Ver et ankeklamr indvask (ABPI) stær end 0,8 eller et ABPI på 0,5 – 0,8 må anvendes kun i 1 dag, berende på et ABPI på 0,5 – 0,8.
- Ved diabetes med fremskredet mikroangiopat – må forbindingen kun anvendes under lægens opsyn.
- Forbindingens omviklinger overlapper hele tiden hinanden med ca. ½ – 2/3. Rosidal® K skal altid

- anlægges med fuldt stræk (maks. stræk).
- Forbindingens omviklinger anlegges cirkulært på trin 1.
- Hælmovlikning, der låses under hælen (mod fødselsl).
- Hælmovlikning, der låses over hælen (mod akilleslener) og yderligere cirkulære omviklinger af forbindingen op til starten af læggen.
- Lægen pålægger et strimmel af Mollelase® K (10 cm bred) i oetstelsbeveeliger.
- Enden af forbindingen fiskeres under kneskaalen med en strimmel Pororix®. tje®-forbindingen, der slutter ved taerne, traktes ud over forbindingen op til knæet.
- Fikseringsstrikt med en strimmel Pororix®. tje®-forbindingen under knæledet og på forføden sær ved hjælp af en cirkulær omvikling med Mollelase®-haft.
- Lærdigt forbinding.

Doet het wassen kan de maximale rek van de zwaacht grotter worden. Houd hiermee rekening bij het aanleggen van de zwaacht.

- Laegen van de zwaacht Rosidal® K (10 cm bred) i oetstelsbeveeliger.
- Enden af forbindingen fiskeres under kneskaalen med en strimmel Pororix®. tje®-forbindingen, der slutter ved taerne, traktes ud over forbindingen op til knæet.
- Fikseringsstrikt med en strimmel Pororix®. tje®-forbindingen under knæledet og på forføden sær ved hjælp af en cirkulær omvikling med Mollelase®-haft.
- Lærdigt forbinding.
- Fixer de toer buisvormige zwaacht under het kniegewricht en op de voorvoet met een circulaire toer Mollelase®.
- Aangebracht verlost.

Algemene anvisninger

- In geval van een ernstig neemt u contact op met de fabrikant en de verantwoordelijke zorgautoriteiten.

- Wassvorswisingen
 - Rosidal® K kan vaskes op til 50 x ved 95 °C

sv Bruksanvisning

Produktbeskrivning og egenskaber
Kompressiessystem til behandling af ulcus cruris venosum i en behandlingsperiode på ca. 12 uger.
Rosidal® K (Kortstrækbar, cremefarvet, 100 % pamuk, 33 % viskose (ref. 24005))
4 x Rosidal® soft (skumpulstribet, hvid), 10 cm x 2 m x 0,2 cm, 100 % polyuretan (ref. 13016)

- 2x Rosidal® K (Kortstrækbar, cremefarvet, 100 % CO, 8 cm x 5 m, 100 % bomuld (ref. 22202))
- 2x Rosidal® K (Kortstrækbar, cremefarvet, 100 % CO, 10 cm x 5 m, 100 % bomuld (ref. 22202))
- 1x Pororix® (hæfteplaster), 2,5 cm x 5 m, Bærestof: 100 % viskose, syntetisk gummi (ref. 143871)
- 1x Mollelase® haft (selvhæftende fikseringsbånd, hvid), 8 cm x 20 m, Bærestof: 66 % viskose, 34 % polyamid, naturligt gummielastisk (ref. 30070)

Anlægsale af bandage
Den utrænede bruger skal af medicinsk fagpersonale opføres i korrekt anlægsale af bandagen.

Indikationer
Den oprullede del af bandagen (bindenklude) skal oppege ud. Bindekluden skal føres tæt ved benet.

Tilslutet anvendelse
Til kompressionsbehandling af ulcus cruris venosum

Indikationer
Ulcus cruris venosum og diets følgesygdomme samt kroniske ødemer (pga. venøs insufficiens)

Kontraindikationer
Fremkredner perifer arteriell okklusivsygdom, hjærtdekompression, septisk flebit, phlegmasia coerulea dolens, perceptions-ubønhjagter i huden, kända allergier ohveller överkänslighet mot produktkomponenter.

Bivirkninger
Fremkredner perifer arteriell okklusivsygdom, kardial dekompression, septisk flebit, phlegmasia coerulea dolens, sanseforstyrrelser i huden, kendte allergier ohveller överkänslighet over for produktkomponenter.

Sådan anlægges forbindingen (modificeret efter Sigga)
1. Rørforbindingen påføres af ca. 2,5 gange længden fra fædsperne over halen til knæet, så halvdelen trækker op over underbenet til knæet, den anden halvdel er en overskydende halvdel i hånden op til halde fodlen i en 90 graders vinkel i ankelledet.

Bivirkninger
Fremkredner perifer arteriell okklusivsygdom, kardial dekompression, septisk flebit, phlegmasia coerulea dolens, sanseforstyrrelser i huden, kendte allergier ohveller överkänslighet over for produktkomponenter.

Advarsler og forholdsregler
1. Undgå ukorrekt bandagering kan medføre hudnekrose og nevrale trykleskader.

- En let bløddet af taerne er normalt; den skal forsvinde, så snart patienten begynder at gå.
- His symptomerne ikke forsvinder (smerte og bløddet), skal forbindingen fjernes og lægges på ny, denne gang med mindre kompression.
- Ved stærkt tilkædet smerte under brugen skal patienten opsiges læge.
- Ver et ankeklamr indvask (ABPI) stær end 0,8 eller et ABPI på 0,5 – 0,8 må anvendes kun i 1 dag, berende på et ABPI på 0,5 – 0,8.
- Ved diabetes med fremskredet mikroangiopat – må forbindingen kun anvendes under lægens opsyn.
- Forbindingens omviklinger overlapper hele tiden hinanden med ca. ½ – 2/3. Rosidal® K skal altid

(almindelig finvaskemiddel/skånevask).

- Kan tørres i tørretumbler med maks. 55 °C og stryges på trin 1.
- Rosidal® soft is tot 50 keer wasbaar op 95°C (met vrij) in de handel verkrijgbaar fijnwasmiddel op de wasmachinestand voor fijne was), niet strijken.
- Doet het wassen kan de maximale rek van de zwaacht grotter worden. Houd hiermee rekening bij het aanleggen van de zwaacht.
- Laegen van de zwaacht Rosidal® K (10 cm bred) i oetstelsbeveeliger.
- Enden af forbindingen fiskeres under kneskaalen med en strimmel Pororix®. tje®-forbindingen, der slutter ved taerne, traktes ud over forbindingen op til knæet.
- Fikseringsstrikt med en strimmel Pororix®. tje®-forbindingen under knæledet og på forføden sær ved hjælp af en cirkulær omvikling med Mollelase®-haft.
- Lærdigt forbinding.

Doet het wassen kan de maximale stræk ags van de zwaacht grotter worden. Houd hiermee rekening bij het aanleggen van de zwaacht.

- Laegen van de zwaacht Rosidal® K (10 cm bred) i oetstelsbeveeliger.
- Enden af forbindingen fiskeres under kneskaalen med en strimmel Pororix®. tje®-forbindingen, der slutter ved taerne, traktes ud over forbindingen op til knæet.
- Fikseringsstrikt med en strimmel Pororix®. tje®-forbindingen under knæledet og på forføden sær ved hjælp af en cirkulær omvikling med Mollelase®-haft.
- Lærdigt forbinding.
- Fixer de toer buisvormige zwaacht onder het kniegewricht en op de voorvoet met een circulaire toer Mollelase®.
- Aangebracht verlost.

Algemene anvisninger

- In geval van een ernstig neemt u contact op met de fabrikant en de verantwoordelijke zorgautoriteiten.

- Wassvorswisingen
 - Rosidal® K kan vaskes op til 50 x ved 95 °C

(almindelig finvaskemiddel/skånevask). Kan tørres i tørretumbler med maks. 55 °C og stryges på trin 1.

- Rosidal® soft is tot 50 keer wasbaar op 95°C (met vrij) in de handel verkrijgbaar fijnwasmiddel op de wasmachinestand voor fijne was), niet strijken.

Doet het wassen kan de maximale rek ags van de zwaacht grotter worden. Houd hiermee rekening bij het aanleggen van de zwaacht.

- Laegen van de zwaacht Rosidal® K (10 cm bred) i oetstelsbeveeliger.
- Enden af forbindingen fiskeres under kneskaalen med en strimmel Pororix®. tje®-forbindingen, der slutter ved taerne, traktes ud over forbindingen op til knæet.
- Fikseringsstrikt med en strimmel Pororix®. tje®-forbindingen under knæledet og på forføden sær ved hjælp af en cirkulær omvikling med Mollelase®-haft.
- Lærdigt forbinding.

Algemene anvisninger

- Foralekomst en af alvorlig handelnde beslede do henvende dig til producenten og de ansvarlige sundhedsmidghediger.

- Algemene anvisninger
 - Rosidal® K kan vaskes op til 50 x ved 95 °C

cs Bruksanvisning

Produktbeskrivning og egenskaber
Kompressiessystem til behandling af ulcus cruris venosum i en behandlingsperiode på ca. 12 uger.
Rosidal® K (Kortstrækbar, cremefarvet, 100 % pamuk, 33 % viskose (ref. 24005))
4 x Rosidal® soft (skumpulstribet, hvid), 10 cm x 2 m x 0,2 cm, 100 % polyuretan (ref. 13016)

- 2x Rosidal® K (Kortstrækbar, cremefarvet, 100 % CO, 8 cm x 5 m, 100 % bomuld (ref. 22202))
- 2x Rosidal® K (Kortstrækbar, cremefarvet, 100 % CO, 10 cm x 5 m, 100 % bomuld (ref. 22202))
- 1x Pororix® (hæfteplaster), 2,5 cm x 5 m, Bærestof: 100 % viskose, syntetisk gummi (ref. 143871)
- 1x Mollelase® haft (selvhæftende fikseringsbånd, hvid), 8 cm x 20 m, Bærestof: 66 % viskose, 34 % polyamid, naturligt gummielastisk (ref. 30070)

Anlægsale af bandage
Den utrænede bruger skal af medicinsk fagpersonale opføres i korrekt anlægsale af bandagen.

Indikationer
Den oprullede del af bandagen (bindenklude) skal oppege ud. Bindekluden skal føres tæt ved benet.

Tilslutet anvendelse
Til kompressionsbehandling af ulcus cruris venosum

Indikationer
Ulcus cruris venosum og diets følgesygdomme samt kroniske ødemer (pga. venøs insufficiens)

Kontraindikationer
Fremkredner perifer arteriell okklusivsygdom, hjærtdekompression, septisk flebit, phlegmasia coerulea dolens, perceptions-ubønhjagter i huden, kända allergier ohveller överkänslighet mot produktkomponenter.

Bivirkninger
Fremkredner perifer arteriell okklusivsygdom, kardial dekompression, septisk flebit, phlegmasia coerulea dolens, sanseforstyrrelser i huden, kendte allergier ohveller överkänslighet over for produktkomponenter.

Sådan anlægges forbindingen (modificeret efter Sigga)
1. Rørforbindingen påføres af ca. 2,5 gange længden fra fædsperne over halen til knæet, så halvdelen trækker op over underbenet til knæet, den anden halvdel er en overskydende halvdel i hånden op til halde fodlen i en 90 graders vinkel i ankelledet.

Bivirkninger
Fremkredner perifer arteriell okklusivsygdom, kardial dekompression, septisk flebit, phlegmasia coerulea dolens, sanseforstyrrelser i huden, kendte allergier ohveller överkänslighet over for produktkomponenter.

Advarsler og forholdsregler
1. Undgå ukorrekt bandagering kan medføre hudnekrose og nevrale trykleskader.

- En let bløddet af taerne er normalt; den skal forsvinde, så snart patienten begynder at gå.
- His symptomerne ikke forsvinder (smerte og bløddet), skal forbindingen fjernes og lægges på ny, denne gang med mindre kompression.
- Ved stærkt tilkædet smerte under brugen skal patienten opsiges læge.
- Ver et ankeklamr indvask (ABPI) stær end 0,8 eller et ABPI på 0,5 – 0,8 må anvendes kun i 1 dag, berende på et ABPI på 0,5 – 0,8.
- Ved diabetes med fremskredet mikroangiopat – må forbindingen kun anvendes under lægens opsyn.
- Forbindingens omviklinger overlapper hele tiden hinanden med ca. ½ – 2/3. Rosidal® K skal altid

Kontraindikationer
Fremkredner perifer arteriell okklusivsygdom, hjærtdekompression, septisk flebit, phlegmasia coerulea dolens, perceptions-ubønhjagter i huden, kända allergier ohveller överkänslighet mot produktkomponenter.

Bivirkninger
Fremkredner perifer arteriell okklusivsygdom, kardial dekompression, septisk flebit, phlegmasia coerulea dolens, sanseforstyrrelser i huden, kendte allergier ohveller överkänslighet over for produktkomponenter.

Advarsler og forholdsregler
1. Undgå ukorrekt bandagering kan medføre hudnekrose og nevrale trykleskader.

- En let bløddet af taerne er normalt; den skal forsvinde, så snart patienten begynder at gå.
- His symptomerne ikke forsvinder (smerte og bløddet), skal forbindingen fjernes og lægges på ny, denne gang med mindre kompression.
- Ved stærkt tilkædet smerte under brugen skal patienten opsiges læge.
- Ver et ankeklamr indvask (ABPI) stær end 0,8 eller et ABPI på 0,5 – 0,8 må anvendes kun i 1 dag, berende på et ABPI på 0,5 – 0,8.
- Ved diabetes med fremskredet mikroangiopat – må forbindingen kun anvendes under lægens opsyn.
- Forbindingens omviklinger overlapper hele tiden hinanden med ca. ½ – 2/3. Rosidal® K skal altid

(almindelig finvaskemiddel/skånevask).

Kan tørres i tørretumbler med maks. 55 °C og stryges på trin 1.

- Rosidal® soft is tot 50 keer wasbaar op 95°C (met vrij) in de handel verkrijgbaar fijnwasmiddel op de wasmachinestand voor fijne was), niet strijken.

Doet het wassen kan de maximale rek ags van de zwaacht grotter worden. Houd hiermee rekening bij het aanleggen van de zwaacht.

- Laegen van de zwaacht Rosidal® K (10 cm bred) i oetstelsbeveeliger.
- Enden af forbindingen fiskeres under kneskaalen med en strimmel Pororix®. tje®-forbindingen, der slutter ved taerne, traktes ud over forbindingen op til knæet.
- Fikseringsstrikt med en strimmel Pororix®. tje®-forbindingen under knæledet og på forføden sær ved hjælp af en cirkulær omvikling med Mollelase®-haft.
- Lærdigt forbinding.

Algemene anvisninger

- Foralekomst en af alvorlig handelnde beslede do henvende dig til producenten og de ansvarlige sundhedsmidghediger.

- Algemene anvisninger
 - Rosidal® K kan vaskes op til 50 x ved 95 °C

(almindelig finvaskemiddel/skånevask). Kan tørres i tørretumbler med maks. 55 °C og stryges på trin 1.

- Rosidal® soft is tot 50 keer wasbaar op 95°C (met vrij) in de handel verkrijgbaar fijnwasmiddel op de wasmachinestand voor fijne was), niet strijken.
- Doet het wassen kan de maximale rek ags van de zwaacht grotter worden. Houd hiermee rekening bij het aanleggen van de zwaacht.
- Laegen van de zwaacht Rosidal® K (10 cm bred) i oetstelsbeveeliger.
- Enden af forbindingen fiskeres under kneskaalen med en strimmel Pororix®. tje®-forbindingen, der slutter ved taerne, traktes ud over forbindingen op til knæet.
- Fikseringsstrikt med en strimmel Pororix®. tje®-forbindingen under knæledet og på forføden sær ved hjælp af en cirkulær omvikling med Mollelase®-haft.
- Lærdigt forbinding.

Algemene anvisninger

- In geval van een ernstig neemt u contact op met de fabrikant en de verantwoordelijke zorgautoriteiten.

- Wassvorswisingen
 - Rosidal® K kan vaskes op til 50 x ved 95 °C

(almindelig finvaskemiddel/skånevask). Kan tørres i tørretumbler med maks. 55 °C og stryges på trin 1.

Doet het wassen kan de maximale rek ags van de zwaacht grotter worden. Houd hiermee rekening bij het aanleggen van de zwaacht.

- Laegen van de zwaacht Rosidal® K (10 cm bred) i oetstelsbeveeliger.
- Enden af forbindingen fiskeres under kneskaalen med en strimmel Pororix®. tje®-forbindingen, der slutter ved taerne, traktes ud over forbindingen op til knæet.
- Fikseringsstrikt med en strimmel Pororix®. tje®-forbindingen under knæledet og på forføden sær ved hjælp af en cirkulær omvikling med Mollelase®-haft.
- Lærdigt forbinding.

Algemene anvisninger

- Foralekomst en af alvorlig handelnde beslede do henvende dig til producenten og de ansvarlige sundhedsmidghediger.

- Algemene anvisninger
 - Rosidal® K kan vaskes op til 50 x ved 95 °C

(almindelig finvaskemiddel/skånevask). Kan tørres i tørretumbler med maks. 55 °C og stryges på trin 1.

- Rosidal® soft is tot 50 keer wasbaar op 95°C (met vrij) in de handel verkrijgbaar fijnwasmiddel op de wasmachinestand voor fijne was), niet strijken.

Doet het wassen kan de maximale rek ags van de zwaacht grotter worden. Houd hiermee rekening bij het aanleggen van de zwaacht.

Algemene anvisninger

- In geval van een ernstig neemt u contact op met de fabrikant en de verantwoordelijke zorgautoriteiten.

- Wassvorswisingen
 - Rosidal® K kan vaskes op til 50 x ved 95 °C

(almindelig finvaskemiddel/skånevask). Kan tørres i tørretumbler med maks. 55 °C og stryges på trin 1.

Doet het wassen kan de maximale rek ags van de zwaacht grotter worden. Houd hiermee rekening bij het aanleggen van de zwaacht.

Algemene anvisninger

- Foralekomst en af alvorlig handelnde beslede do henvende dig til producenten og de ansvarlige sundhedsmidghediger.

- Algemene anvisninger
 - Rosidal® K kan vaskes op til 50 x ved 95 °C

(almindelig finvaskemiddel/skånevask). Kan tørres i tørretumbler med maks. 55 °C og stryges på trin 1.

- Rosidal® soft is tot 50 keer wasbaar op 95°C (met vrij) in de handel verkrijgbaar fijnwasmiddel op de wasmachinestand voor fijne was), niet strijken.

Doet het wassen kan de maximale rek ags van de zwaacht grotter worden. Houd hiermee rekening bij het aanleggen van de zwaacht.

Algemene anvisninger

- In geval van een ernstig neemt u contact op met de fabrikant en de verantwoordelijke zorgautoriteiten.

- Wassvorswisingen
 - Rosidal® K kan vaskes op til 50 x ved 95 °C

(almindelig finvaskemiddel/skånevask). Kan tørres i tørretumbler med maks. 55 °C og stryges på trin 1.

Doet het wassen kan de maximale rek ags van de zwaacht grotter worden. Houd hiermee rekening bij het aanleggen van de zwaacht.

Algemene anvisninger

- Foralekomst en af alvorlig handelnde beslede do henvende dig til producenten og de ansvarlige sundhedsmidghediger.

- Algemene anvisninger
 - Rosidal® K kan vaskes op til 50 x ved 95 °C

(almindelig finvaskemiddel/skånevask). Kan tørres i tørretumbler med maks. 55 °C og stryges på trin 1.

Doet het wassen kan de maximale rek ags van de zwaacht grotter worden. Houd hiermee rekening bij het aanleggen van de zwaacht.

Algemene anvis